



Therabody

RecoveryAir PRO

Rychlý Návod

Personalized Recovery.


Recovery Air PRO

Plně přizpůsobitelný vzdušný kompresní systém.

Váš vzdušný kompresní systém RecoveryAir PRO je dodáván s pumpou, párem kompresních bot, zástrčkou, stejnosměrným napájecím adaptérem a taškou na přenášení pumpy i bot.

Začínáme



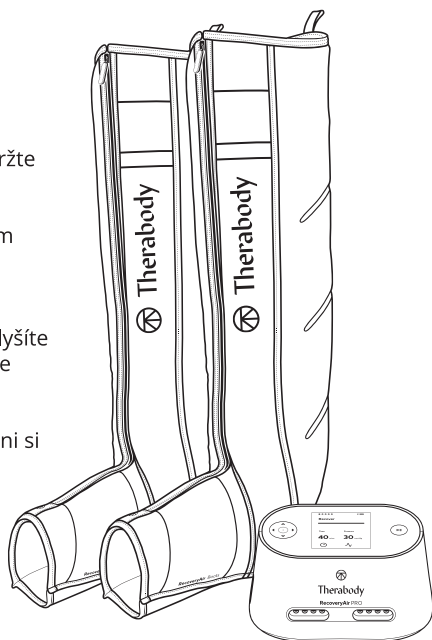



1. Chcete-li pumpu RecoveryAir PRO zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapínání.
2. Nejprve si navlečte kalhoty, než je připojíte k pumpě. To vám umožní se dostat do nejpohodlnější polohy a vyhněte se jakémukoli narušení připojení proudění vzduchu.
3. Dále zapojte konektor z kalhot do pumpy. Ujistěte se, že uslyšíte „cvaknutí“, takže víte, že RecoveryAir PRO je plně připojen, je zapojený a má správné těsnění.
4. Jakmile se připojíte a budete se cítit pohodlně, jste připraveni si přizpůsobit léčbu.








Připravte si léčbu

1. Chcete-li pumpu RecoveryAir PRO zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapínání.
2. Přizpůsobte si léčbu z rozhraní pumpy.
3. Pomocí levé a pravé šipky na 4-směrném tlačítku procházejte 5 přednastavenými možnostmi ošetření: Recover, Warm-up, Isolation, Interval a PRO Mode (Custom).
4. Jakmile si vyberete požadovanou předvolbu ošetření, pomocí šipek nahoru a dolů na 4-směrném tlačítku upravte nastavení tlaku.
5. Chcete-li vytvořit vlastní rutinu, jednoduše stiskněte tlačítko výběru, dokud se neobjeví nová obrazovka.
6. Poté pomocí tlačítek výběru a šipek procházejte možnosti, jako je tlak, čas, podržení, uvolnění a přechod, vytvářející plně personalizovanou rutinu.
7. Jakmile si vyberete možnosti léčby, které jsou pro vás vyhovující, stlačte play, uvolněte se a během okamžiku budete na cestě k zotavení. Své rutiny můžete také snadno sdílet s ostatními uživateli RecoveryAir prostřednictvím aplikace Therabody.

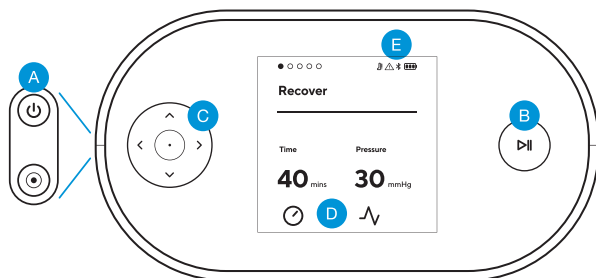Feature Callouts

- A**  Tlačítko zapínání
- B**  Tlačítko Start/Pauza/Stop
- C**  4-směrná tlačítka
- C**  Tlačítko výběru
- D**  Nastavení (Nastavitelný rozsah)
Nastavení Tlaku
Nastavitelný rozsah tlaku (20-100mmHg) v přírustcích po 5mmHg. Nastavitelný rozsah tlaku v krocích po 1mmHg. (Nastavení gradientu)
-  Nastavení Času
10min-90min.



- E**  Indikátory
-  Varovný Indikátor
Indikátor svítí trvale nebo bliká, když je zjištěna porucha zařízení.
-  Indikátor Bluetooth
Indikátor se rozsvítí pouze po připojení do aplikace.
-  Indikátor Baterie
3 LED kontrolky indikující životnost baterie.

Chytré Funkce

RecoveryAir PRO se také připojuje k aplikaci Therabody přes Bluetooth, což vám dává úplnou kontrolu nad vaším RecoveryAir PRO z pohodlí vašeho smartphonu.

Nejen, že máte snadný přístup k možnostem, jako je tlak v jednotlivých komorách, ale můžete vytvářet a sdílet vlastní rutiny se svými přáteli, klienty nebo pacienty přímo z aplikace prostřednictvím textové zprávy nebo e-mailu.



Naskenujte QR kód
a začněte



Therabody

RecoveryAir PRO

Rýchly Návod

Personalized Recovery.


Recovery Air PRO

Plne prispôsobiteľný vzdušný kompresný systém.

Váš vzdušný kompresný systém RecoveryAir PRO je dodávaný s pumpou, párom kompresných nohavíc, zástrčkou, jednosmerným napájacím adaptérom a taškou na prenášanie pumpy aj nohavíc.

Začíname



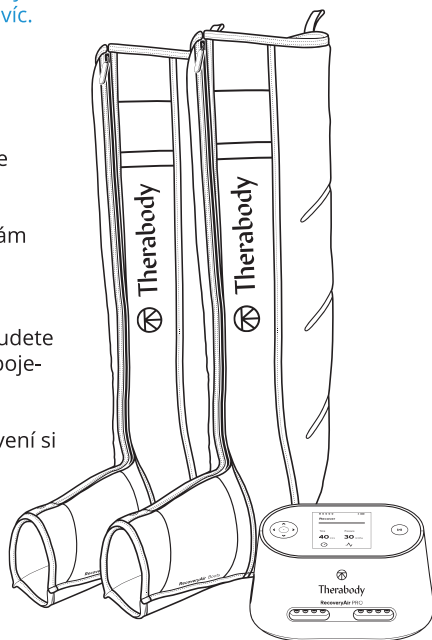

1. Ak chcete pumpu RecoveryAir PRO zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapínania.
2. Najprv si nasadte nohavice, než ich pripojíte k pumpke. To vám umožní sa dostať do najpohodlivejšej polohy a vyhnete sa akémukoľvek narušeniu pripojenia prúdenia vzduchu.
3. Ďalej zapojte konektor z nohavíc do pumpy. Uistite sa, že budete počuť „cvaknutie“, tak viete, že RecoveryAir PRO je plne pripojený, je zapojený a má správne tesnenie.
4. Akonáhle sa pripojíte a budete sa cítiť pohodlne, ste pripravení si prispôbiť liečbu.



Prípravte si liečbu

1. Ak chcete pumpu RecoveryAir PRO zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapínania.
2. Prispôsobte si liečbu z rozhrania pumpy.
3. Pomocou ľavej a pravej šípky na 4-smernom tlačidle prechádzajte 5 prednastavenými možnosťami ošetrovania: Recover, Warm-up, Isolation, Interval a PRO Mode (Custom).
4. Akonáhle si vyberiete požadovanú predvoľbu ošetrovania, pomocou šípok hore a dole na 4-smernom tlačidle upravte nastavenie tlaku.
5. Ak chcete vytvoriť vlastnú rutinu, jednoducho stlačte tlačidlo výberu, kým sa neobjaví nová obrazovka.
6. Potom pomocou tlačidiel výberu a šípok prechádzajte možnosti, ako je tlak, čas, podržanie, uvoľnenie a prechod, vytvárajúce plne personalizovanú rutinu.
7. Akonáhle si vyberiete možnosti liečby, ktoré sú pre vás vyhovujúce, stlačte play, uvoľnite sa a behom okamihu budete na ceste k zotaveniu. Svoje rutiny môžete tiež ľahko zdieľať s ostatnými užívateľmi RecoveryAir prostredníctvom aplikácie Therabody.

Popisy funkcií


- A**  Tlačidlo zapínania
- B**  Tlačidlo Štart/Pauza/Stop
- C**  4-smerné tlačidlo
- C**  Tlačidlo výberu

- D**  Nastavenie (Nastaviteľný rozsah)

Nastavenie tlaku

Nastaviteľný rozsah tlaku (20-100 mmHg) v prírastkoch po 5 mmHg. Nastaviteľný Rozsah tlaku v krokoch po 1 mmHg (Nastavenie gradientu).

- D**  Nastavenie času
10min-90min.

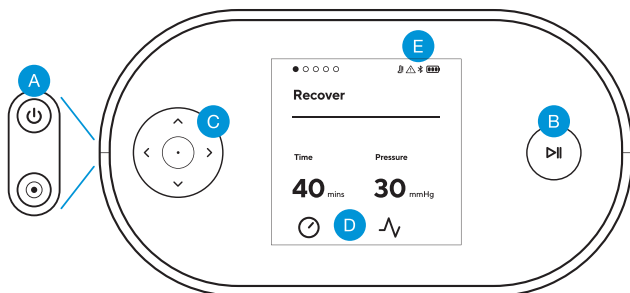

- E**  Indikátory

Varovný indikátor

Indikátor svieti trvalo alebo bliká, keď je zistená porucha zariadenia.

-  Indikátor Bluetooth

Indikátor sa rozsvieti iba po pripojení do aplikácie.

-  Indikátor batérie

3 LED kontrolky indikujúce životnosť batérie

Inteligentné funkcie

RecoveryAir PRO sa tiež pripája k aplikácii Therabody cez Bluetooth, čo vám dáva úplnú kontrolu nad vašim RecoveryAir PRO z pohodlia vášho smartfónu.

Nielenže máte jednoduchý prístup k možnostiam, ako je tlak v jednotlivých komorách, ale môžete vytvárať a zdieľať vlastné postupy so svojimi priateľmi, klientmi alebo pacientmi priamo z aplikácie prostredníctvom textovej správy alebo e-mailu.



Naskenujte QR kód
a začnete



Therabody

RecoveryAir PRO

Quick Start Guide

Personalized Recovery.


Recovery Air PRO

Fully customizable pneumatic compression system

Your RecoveryAir PRO pneumatic compression system comes with a pump, a pair of compression boots, a blocker plug, a DC power adapter, and a carrying pouch for both the pump and boots.

Getting started



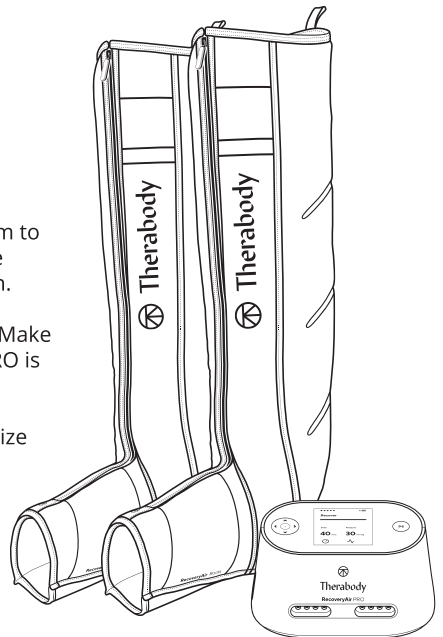

1. To turn on the RecoveryAir PRO pump, press and hold the power button.
2. To get started, put your boots on first before attaching them to the pump. This allows you to get into the most comfortable position and avoid any disruption in the air flow connection.
3. Next, plug in the connector from the boots into the pump. Make sure you hear a “click” so that you know the RecoveryAir PRO is fully connected, is plugged in, and there is a proper seal.
4. Once connected and comfortable, you are ready to customize your treatment.



Prepare your treatment

1. To turn on the RecoveryAir PRO pump, press and hold the power button.
2. Customize your treatment from the pump interface.
3. Using the left & right arrows in the 4-way button, scroll through the 5 preset treatment options: Recover, Warm-up, Isolation, Interval, and PRO Mode (Custom).
4. Once you have chosen your desired treatment preset, use the up & down arrows in the 4-way button to adjust the pressure setting.
5. To create a custom routine, simply press the select button until a new screen appears.
6. Then, use your select and arrow buttons to navigate the options such as Pressure, Time, Hold, Release, and Gradient, creating a fully personalized routine.
7. Once you have selected the treatment options that are right for you, push play, relax, and you'll be on your way to recovery in no time. You can also share your routines with other RecoveryAir users easily through the Therabody app.

Feature Callouts

- A**  Power Button
- B**  Start/Pause/Stop Button
- C**  4-way Buttons
- C**  Select Button


D Settings (Adjustable Range)

Pressure Setting

Adjustable Pressure Range (20-100mmHg) in increments of 5mmHg. Adjustable Pressure Range in increments of 1mmHg (Gradient Setting).

Time Setting

10min-90min.

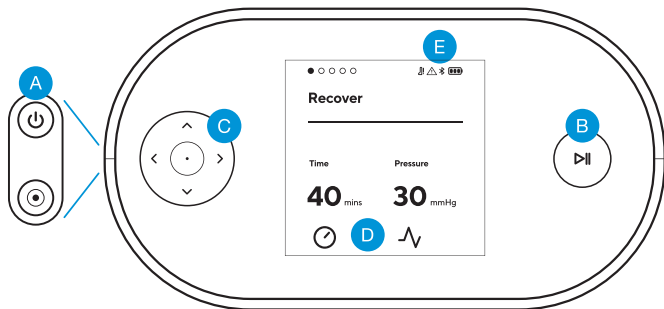

E Indicators



Warning Indicator

Indicator lights up solid ON or blinking when a device malfunction is detected.



Bluetooth Indicator

Indicator turns ON only when connected to the App.



Battery Indicator

3 LED lights to indicate battery life.

Smart Features

TheRecoveryAir PRO also connects to the Therabody app via Bluetooth, giving you total control of your RecoveryAir PRO session from the convenience of your smartphone.

Not only can you easily access options like individual chamber pressure, but you can create and share custom routines with your friends, clients, or patients directly from the app via text message or email.



Scan the QR code to get started